




## **CARRO DE LAVADO HIDRÁULICO CLH - 620**

**SÖCINSER** “Juntos hacemos grandes cosas”

# Presentación

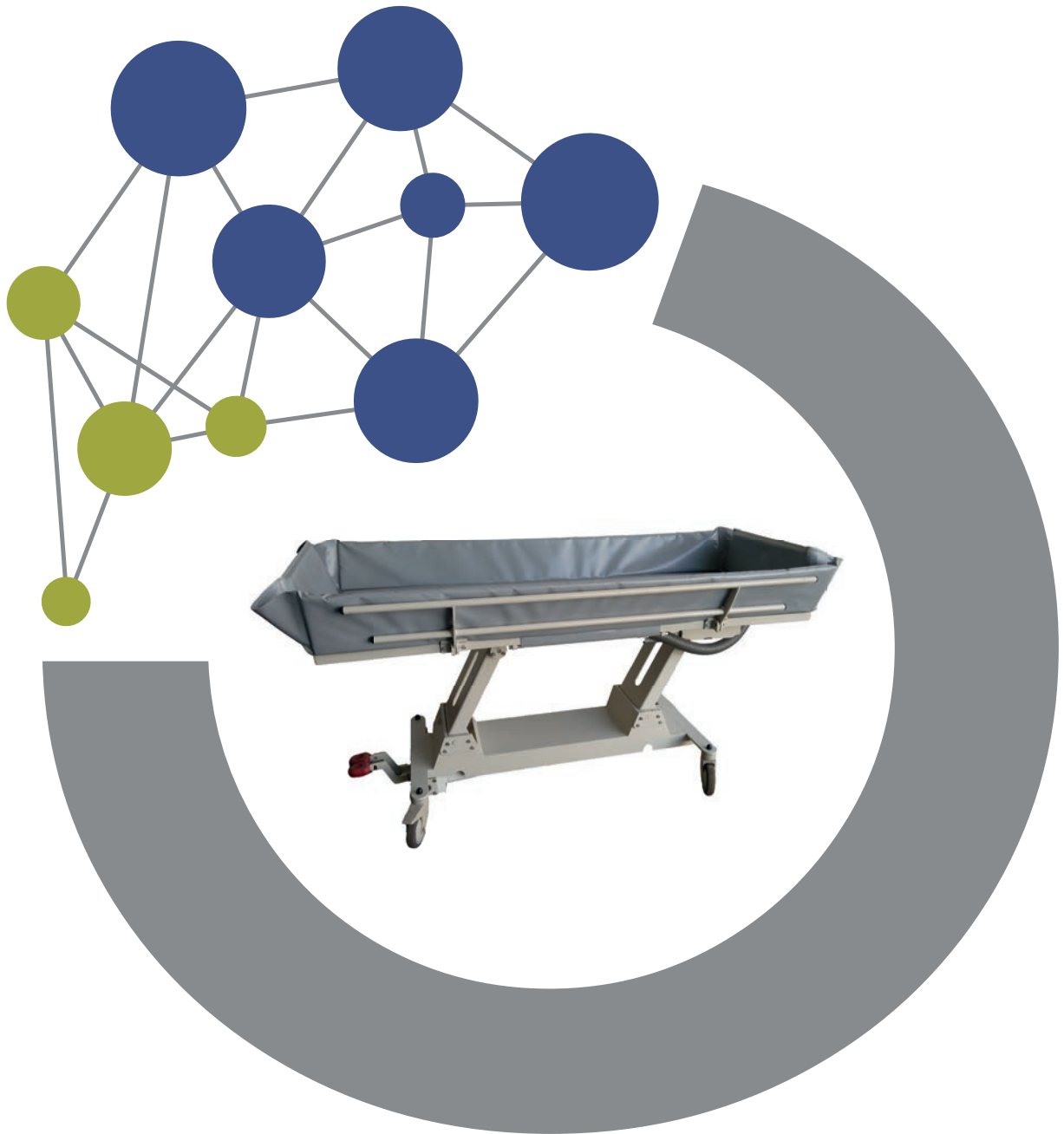

**Imprescindible.** En eso se convertirá este carro de lavado para tu trabajo diario por su comodidad. Buscando la satisfacción de nuestros clientes, en Socinser hemos diseñado un **carro de lavado ergonómico con una posición muy baja para tu comodidad postural**, permitiéndote movilizar a tu paciente a la cama o camilla con seguridad para él y sin riesgos para ti.

Pensando en hacer tu vida más fácil, todos los **mandos se ubican en la cabecera**, para que lo puedas manejar de manera sencilla y sin esfuerzo. A pesar de soportar hasta 170 kg de peso, notarás su **facilidad de maniobra en recintos pequeños** como baños, pasillos y ascensores por su reducido peso, avalado con un estudio de ergonomía hecho en colaboración con la Universidad de Oviedo.

Tu paciente sentirá **su estabilidad y robustez para una mayor relajación y sensación de seguridad**. Lo hacemos posible gracias a un **doble brazo de elevación articulado** activado por dos actuadores hidráulicos independientes que permiten la regulación de trendelenburg y antitrendelenburg tanto en ascenso como en descenso para ofrecerte la mayor libertad de movimientos.

Ponemos a tu disposición nuestro servicio de accesorios y **personalización de soluciones** orientado a nuestros **clientes más exigentes**.

Socinser, los expertos en ingeniería para la salud que ven las cosas desde tú punto de vista. **Porque nuestra prioridad es tu bienestar y el de tu paciente.**

# Características



## Comodidad y ergonomía para tu día a día.

Posición muy baja para máxima comodidad en la movilización. Nuestro objetivo: **cero lesiones**.

**Mandos** regulables desde la cabecera.

Libertad de movimientos y **maniobrabilidad** en recintos pequeños.

**Bañera** diseñada para máximo confort, fácilmente desmontable para su limpieza.

---

## Nos importa tu seguridad.

**Máxima estabilidad:** bastidor inferior con **doble brazo** de elevación articulado que permite la regulación del carro tanto en altura como la inclinación en tren-antitrendelenburg simultáneamente con sólo dos pedales.

Desalajo del agua de forma sencilla y **controlada**.

Ruedas con **freno incorporado** para realizar el embarque del paciente de forma cómoda y segura.

Dos barandillas abatibles con sistema de **bloqueo, desbloqueo y autosujeción**.



---

## Máxima calidad, resistencia y durabilidad. El futuro en tus manos.

Todos sus componentes han sido construidos con los **más altos estándares de calidad** utilizando acero de gran espesor y un recubrimiento especial de pintura EPOXI anticorrosión en polvo, libre de poliéster.



Función tren - antitrendelenburg	Activas, tanto en fase de ascenso y descenso.
Inclinación	15°, tanto hacia los pies como hacia el cabecero.
Barandillas	Fabricadas en tubo redondo de acero, abatibles, de 230 mm de altura con sistema de bloqueo, desbloqueo y autosujeción.
Desagüe	Fabricado en PVC, con tubo flexible.
Ruedas	125 mm de diámetro, 2 de ellas con bloqueo y freno individual.
Bañera	Fabricada con lona plastificada gruesa de alta densidad con tolerancia hasta 70°C.
Algunos complementos optativos personalizables	Reposacabezas, Cesta porta-ropa, Carta de colores para pintura.

Fabricado en España.

**SOCINSER**  
Medical Devices

C/Colegio Santo Domingo de Guzmán s/n  
33011 Oviedo (Asturias)  
Tel.: +34 985 30 70 30  
www.socinser.com  
socinser@socinser.com